


VIŠEKRAATNA UPOTREBA RESPIRATORA N95

Sažetak smjernica američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti
Primjenjivo na ekvivalentne respiratore drugih oznaka (npr. FFP1/2/3)



VIŠEKRAATNA UPOTREBA odnosi se na praksu korištenja istog respiratora za kontakt s više pacijenata. Respirator se pohranjuje između kontakta s pacijentima, da bi se ponovno upotrijebio.

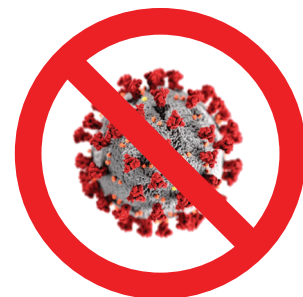

KADA ODBACITI RESPIRATOR?

- Nakon uporabe tijekom postupaka pri kojima se stvara aerosol
- Ako je kontaminiran krvlju, respiratornim ili nosnim izlučevinama te drugim tjelesnim tekućinama pacijenta
- Nakon bliskog kontakta s bilo kojim pacijentom sa zaraznom bolešću za kojeg su potrebne mjere opreza
- Ako je očito oštećen ili disanje kroz njega postane teško
- Nakon najviše 5 upotreba, ako ne postoje dodatne specifične upute

KAKO SPREMITI RESPIRATOR NAKON UPOTREBE?

- Respirator objesite u za to određen skladišni prostor ili ga čuvajte u čistom, prozračnom spremniku, poput papirnate vrećice
- Pohranite respiratore tako da se ne dodiruju
- Označite spremnik ili respirator (npr. na trakama) korisnikovim imenom da bi se smanjila slučajna upotreba respiratora od druge osobe
- Spremnike za skladištenje redovito odložite ili čistite

DODATNE MJERE ZAŠTITE

- Razmislite o upotrebi dodatne zaštite lica preko respiratora i/ili drugih koraka (npr. stavljanje maske na pacijenta) za smanjenje kontaminacije površina
- Perite ruke sapunom i vodom ili sredstvom za čišćenje ruku na bazi alkohola prije i nakon dodirivanja ili namještanja respiratora (ako je potrebno za udobnost ili za održavanje brtvljenja)
- Upotrijebite par čistih (nesterilnih) rukavica dok stavljate rabljeni respirator i obavljate provjeru brtvljenja
- Odbacite rukavice nakon što dotaknete respirator ili podesite respirator

